

PORTUGUÊS



Manual do proprietário:

Ride® Forward™ Cushion



Ride Designs®

a branch of Aspen Seating, LLC

8100 SouthPark Way, C400
Littleton CO, 80120

telefone gratuito (Apenas EUA): 866.781.1633
telefone: 303.781.1633
www.ridedesigns.com

Fornecedor: Este manual deve ser transferido ao usuário final deste produto, pois contém informações importantes para o uso adequado deste produto.

Usuário: Leia cuidadosamente este manual inteiro antes de usar este produto e guarde-o para futura referência.

Uso pretendido e instruções de instalação

Uso pretendido

A sua Ride Designs® Forward™ Cushion é uma almofada ajustável para cadeiras de rodas, que foi cuidadosamente projetada para satisfazer as suas necessidades de postura e integridade de pele, e foi também projetada para ser acoplada em diversos estilos e tamanhos de cadeiras de rodas para ajudar no suporte e posicionamento dos usuários de cadeiras de rodas.

Capacidade de peso

○ peso máximo do usuário é de 160kg.

Segurança geral do produto

A aplicação segura deste produto depende do seu bom julgamento e senso comum, bem como a de seu fornecedor, cuidador, e/ou profissional de saúde, e sua atenção no seguimento das observações, cuidados e instruções deste manual.

OBSERVAÇÃO: Denota coisas importantes a ser lembradas ao usar esse produto.

⚠ **AVISO:** A falha em seguir essas instruções poderia resultar em danos ao produto ou ferimentos ao usuário.

⚠ **CUIDADO:** A falha em dar atenção aos avisos pode resultar em danos ao seu produto.

OBSERVAÇÃO: Este manual foi feito a partir das últimas especificações e informações do produto disponíveis no momento da publicação. Reservamo-nos no direito de fazer quaisquer alterações quando se tornarem necessárias. Quaisquer alterações aos nossos produtos podem causar leves variações entre as ilustrações e explicações deste manual e do produto que você adquiriu. Sempre contate o seu fornecedor ou distribuidor autorizado mais próximo da Ride Designs, ou www.ridedesigns.com para a última literatura e informações.

📖 Por favor, leia esse manual de instruções antes de usar esse produto.

⚠ Todas as almofadas da Ride Designs são projetadas para ajudar a reduzir a incidência de feridas de pressão. Entretanto, nenhuma almofada consegue eliminar completamente feridas de assentamento ou prevenir feridas de pressão. As almofadas da Ride Java não são substitutas para um bom cuidado de pele incluindo dieta adequada, limpeza e técnicas regulares de alívio de pressão.

⚠ O uso da Ride Forward Cushion sem todos os componentes corretamente montados, incluindo a cobertura interna e externa e espuma pode resultar em ferimentos ao usuário.

⚠ A instalação de uma almofada na sua cadeira de rodas pode alterar o seu centro de gravidade na cadeira de rodas e fazer com que ela tombe para trás, potencialmente resultando em ferimentos. Sempre avalie a necessidade de rodinhas ou suportes de adaptador a serem adicionados a sua cadeira de rodas para aumentar a instabilidade.

⚠ O colocamento ou segurança inadequada da Ride Forward Cushion a sua cadeira de rodas pode resultar em ferimentos. Sua cadeira de rodas deve ter fecho de gancho extra na amarra ou assento sólido para uma segurança adequada da almofada.


⚠ A falha em avaliar precisamente e encaixar a Ride Forward Cushion pode resultar em ferimentos ao usuário.

⚠ A configuração da cadeira de rodas e o encaixe correto do apoio às costas e pés são importantes para o uso bem sucedido de qualquer almofada da cadeira de rodas. A falha em cumprir adequadamente esses itens pode resultar em ferimentos ao usuário.

⚠ **AVISO:** Os materiais da Ride Forward trabalham perfeitamente em temperatura ambiente. Não deixe a almofada em temperaturas abaixo de 5° C por períodos prolongados. Sempre permita que a Ride Forward Cushion fique na temperatura ambiente antes do uso. Sentar em superfícies excessivamente frias ou quentes pode causar danos à pele.

Instruções de instalação e uso

Recomenda-se que um terapeuta ou fornecedor autorizado da Ride Designs execute o encaixe inicial da sua almofada. A sua Ride Forward Cushion, junto com sua exclusiva cobertura, é projetada para confortavelmente estabilizar sua posta e ajudar a reduzir seu risco de ruptura de pele.

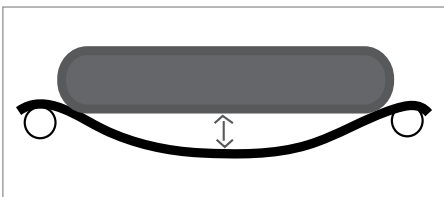

Preparando a cadeira de rodas para a sua Ride Forward Cushion

A sua Ride Forward Cushion é projetada para trabalhar igualmente nas inserções de assento sólidas ou de amarra.

OBSERVAÇÃO: Se o seu assento de amarra apresenta um vão entre o fundo da almofada e estofamento de amarra, o estofamento deve ser apertado ou substituído.

⚠ **CUIDADO:** A Ride Forward Cushion não deve estender-se por mais de 1 polegada além da frente do seu assento sólido ou de amarra da cadeira de rodas.

Instalação e encaixe da sua Ride Forward Cushion

1. Coloque a almofada na cadeira de rodas para que a traseira da almofada, identificável pelas etiquetas, esteja nivelada com a parte traseira do assento sólido ou de amarra. Assegure que o fecho do laço no fundo da cobertura da Forward entre em contato com o fecho do gancho no assento sólido ou de amarra da sua cadeira de rodas.
2. Sente-se suavemente na almofada. Curve-se para frente no tronco e mova seu traseiro no fundo da almofada. Assegure que seus ossos da bacia descansem dentro do alívio nos lados da almofada e que seus músculos do glúteo estejam apoiados nos cantos traseiros da almofada.
3. Ajuste a altura do seu descanso de pés para que as suas pernas descansem confortavelmente na frente da almofada. Altura correta do descanso de pés é imperativa para uma ótima performance da almofada.

⚠ Se você for incapaz de conseguir uma suficiente proteção de pele, controle de postura e/ou for incapaz de tolerar o assento na almofada por qualquer motivo, o Ride Forward Cushion não é a opção adequada, e uma Ride Java Cushion ou Custom Cushion deve ser considerada. Contate seu fornecedor certificado da Ride Designs para mais informações sobre a Ride Java Cushion ou Ride Custom Cushion (EUA apenas).

Cronograma de uso inicial

Antes de sentar-se prolongadamente, recomenda-se sentar na almofada por curtos períodos de tempo. Verifique visualmente qualquer área que entre em contato com a almofada após cada período de uso. Qualquer área avermelhada deve desaparecer dentro de 10-30 minutos. Contate seu médico ou terapeuta se a vermelhidão persistir por mais de 30 minutos. Contanto que as inspeções de pele não mostrem áreas vermelhadas persistindo por mais de 30 minutos, amplie a duração do tempo de assento gradualmente (de trinta a uma hora por dia). Continue as verificações de pele após cada tempo de assento ampliado. Períodos de duas a quatro horas são o tempo máximo geral recomendado na posição de assento. As verificações de pele devem ser feitas diariamente, mesmo após a tolerância de pele ser estabelecida. Continue a executar técnicas de alívio de pressão rotineiras (levantamentos manuais ou trocas de peso usando inclinações) conforme aconselhado pelo seu profissional de saúde.

⚠ AVISO: Se qualquer vermelhidão associada ao uso da almofada Forward persistir por mais de 30 minutos, pare de sentar na almofada e contate seu terapeuta ou médico imediatamente.

⚠ Avaliações de rotina e ajustes devem ser realizados para garantir espaçamento adequado nas suas tuberosidades isquiáticas devido ao ganho de peso ou compressão ligeira da almofada que pode ocorrer no decorrer da vida do produto. A falha em avaliar e ajustar regularmente o espaçamento da tuberosidade isquiática pode resultar em ferimentos.

Acompanhamento

Recomenda-se que você tenha sua postura e integridade de pele verificados pelo seu profissional da saúde ao menos anualmente, ou sempre que você vivenciar uma mudança no seu peso, postura ou condição geral que poderia ter impacto na sua capacidade de sentar-se confortavelmente, seguramente e funcionalmente.

Símbolos de cuidado de lavanderia	
	Lavagem à máquina, água quente (60° C)
	Não usar alvejante
	Deixar escorrer
	Não limpar a seco
	Não engomar

Cuidados e manutenção da Forward Cushion

Limpeza da cobertura externa

- Remova sua Ride Forward Cushion da cadeira de rodas.
- Remova a cobertura externa da almofada. Feche a cobertura com zíper.
- Lave na máquina de lavar ou à mão em água morna (60°C, detergente regular/sem água sanitária).
- Pendure para secar.

Limpeza de revestimento resistente a chamas

Em conformidade com o padrão europeu de inflamabilidade EN-1021-2: 2014, sua almofada Ride Forward vem com um forro feito de material resistente ao fogo, instalado sobre a cobertura preta, resistente à umidade interna.

A remoção deste material resistente a chamas diminuirá significativamente a resistência a chamas desta almofada.

Para limpar:

- Remova sua almofada Ride Forward da cadeira de rodas.
- Remova a cobertura externa da almofada.
- Remover a bainha resistente à chama da almofada.
- Lave à máquina ou à mão em água morna (60°C/140°F, detergente normal/sem água sanitária).
- Pendure para secar.
- Quando secos, puxar a bainha à prova de fogo sobre a almofada, sobre a tampa interna resistente à umidade. Puxar de frente para trás. Dobre o material em excesso embaixo da almofada.
- Insira a almofada na cobertura externa. Garantir que a tampa seja colocada corretamente da frente para trás.
- Ao usar o zíper para fechar a tampa externa, tome cuidado para não prender o material resistente à chama.

Limpeza da almofada

- A cobertura interna resistente à umidade é projetada para proteger os materiais de espuma da almofada e não deve ser removida. Se suja, apenas limpe com um pano úmido.
- Quando seca, insira a almofada na cobertura. Assegure que a cobertura seja colocada corretamente costas-com costas.
- Coloque a almofada na cadeira de rodas para que a traseira da almofada, identificável pelas etiquetas, esteja nivelada com a parte traseira do assento sólido ou de amarra.

Vida do produto

O uso máximo pretendido desse produto é quatro anos.

Reuso

RISCO DE FERIMENTO: Consulte um fornecedor autorizado da Ride Designs antes de transferir para outro usuário. NÃO use o produto se quaisquer danos forem encontrados.



Eliminação

♻️ Recicle componentes e materiais de acordo com regulamentos locais, estaduais e nacionais.

Política de garantia

A sua Ride Forward Cushion foi construída cuidadosamente para cumprir suas necessidades de assento na cadeira de rodas. Esta garantia limitada é efetiva por 24 meses a partir da data de entrega ao comprador original. Se qualquer defeito em material ou acabamento for encontrado, a Ride Designs® reparará ou substituirá o componente, a seu critério. Esta garantia limitada não cobre desgaste diário e laceração ou dano que for resultado de mau uso, negligência ou não seguir as instruções de manutenção e cuidado.

A sua cobertura da almofada tem garantia de 90 dias. A garantia inclui danos devido à fabricação, defeitos em material ou erros causados pelo fabricante. Essa garantia não se aplica a queimaduras de cigarro, danos à cobertura por objetos afiados que possam causar rasgos, ou danos como resultado do não seguimento das instruções de lavagem.

Reivindicações e reparos devem ser processados através do fornecedor ou distribuidor de tecnologia de recuperação Ride Designs autorizado mais próximo. Uma cópia da nota fiscal emitida ao comprador do produto pode ser exigida antes de processar uma reivindicação de garantia.

A Ride Forward Cushion funciona melhor quando usado com um apoio Ride Designs Back

O design biomecanicamente preciso patenteado pela Java Back permite que o encaixe rapidamente, facilmente e independentemente otimize o apoio pélvico e equilíbrio do tronco de uma forma que imita o ritmo e movimento normais do corpo. O usuário experimenta conforto e estabilidade no descanso, e nenhuma interferência na mobilidade e funcionamento. Os suportes Java Back estão disponíveis em uma variedade de alturas, larguras e profundidades.

Para pessoas com necessidades desafiantes de controle de postura, considere os apoios para as costas e Ride Custom Cushion (EUA apenas), a novidade no cuidado de pele e apoio de postura.

Notas de instalação

Patentes: www.ridedesigns.com/patents
 © 2021, Ride Designs. 090-030-E



MDSS GmbH
 Schiffgraben 41
 30175 Hannover, Germany