

## Handbok:

# Ride™ Corbac™ Justerbart ryggstöd



### **Ride Designs®**

en gren till Aspen Seating, LLC.

8100 SouthPark Way  
Littleton, Colorado 80120 USA

gratissamtal (endast inom USA): 866.781.1633  
telefon: 303.781.1633  
[www.ridedesigns.com](http://www.ridedesigns.com)

**Leverantör:** Denna handbok måste överlätas till slutanvändaren av denna produkt eftersom den innehåller viktig information om korrekt användning av produkten.

**Användare:** Läs noga igenom hela denna handbok innan du börjar använda produkten och spara den för framtida hänvisning.

### **Avsedd användning och installationsinstruktioner**

#### **Avsedd användning**

Din Ride Designs® Corbac™ dyna är ett justerbart ryggstöd till rullstolar som omsorgsfullt har konstruerats för att uppfylla dina hållnings- och hudintegritetsbehov och har designats för att kunna monteras på flera olika rullstolssorter och storlekar för att underlätta stöd och placering för rullstolsanvändare.

#### **Tyngdkapacitet**

Maximal användarvikt är 250 pund (113 kg).



## Allmän produktsäkerhet

Säker användning av denna produkt beror på ditt goda omdöme och sunda förnuft, likaväl som din leverantörs, din vårdgivares, och / eller sjukvårdspersonals, och din uppmärksamhet när det gäller att följa varningarna, noteringarna och instruktionerna i denna handbok.

OBS: Vi har sammanställt den här handboken från senaste tillgängliga specifikationer och produktinformation vid tidpunkten för utgivandet. Vi förbehåller oss rätten att göra förändringar så som de blir nödvändiga. Eventuella förändringar i våra produkter kan orsaka små variationer mellan bilder och förklaringar i den här handboken och den produkt du har köpt.

⚠ **WARNING:** Alla Ride Designs stödytor är avsedda för att hjälpa minska förekomsten av trycksår. Inget ryggstöd kan dock helt eliminera tryck från sittande eller förebygga trycksår. Ride Corbac är inte ett substitut för bra hudvård inklusive hälsosam kost, renlighet och regelbundna tryckavlastningstekniker.

**WARNING:** Om varningar inte följes kan det leda till att produkten skadas.

⚠ **i** Läs igenom denna instruktionsbok innan du använder produkten.

⚠ Alla Ride Designs stödytor är avsedda för att hjälpa minska förekomsten av trycksår. Inget ryggstöd kan dock helt eliminera tryck från sittande eller förebygga trycksår. Ride Corbac är inte ett substitut för bra hudvård inklusive hälsosam kost, renlighet och regelbundna tryckavlastningstekniker.

⚠ Installering av ryggstödet på rullstolen kan ändra din tyngdpunkt i rullstolen. Ett bakåtlutat läge kan leda till att rullstolen tippas bakåt vilket kan resultera i personskador. Överväg alltid behovet av tippmotstånd eller axeladapterfästen för amputeringar som kan läggas till på din rullstol för att öka stabiliteten. På samma sätt kan en framåtlutat ryggposition minska rullstolens stabilitet på framsidan vilket ökar risken att tippa framåt med möjligheten att skada sig.

⚠ Använd inte din Corbac utan nätöverdraget.

⚠ Lyft inte rullstolen från Corbac-ryggstödet.

⚠ Felaktig placering eller festsättning av Ride Corbac-ryggstödet på din rullstol kan orsaka skador.

⚠ Denna produkt ska installeras och monteras av kvalificerad och kompetent sjukvårdspersonal. Om felbedömning eller feljustering av Corbac ryggstödet sker kan det leda till att användaren skadas.

## Instruktioner för installering och användning

Det rekommenderas att en terapeut eller auktoriserad Ride Designs leverantör genomför den första monteringen av ditt ryggstöd. Ditt Ride Corbac-ryggstöd är designad för att öka stabiliteten av bälens kärna genom stöd till ryggen och sidorna av nedre bälten, ländrygg och bäcken (dvs kärnan). Corbacs justerbara fäste använder sig av remmar för att kunna ge det primära stödet för balans och inriktning. Stöden för bröst-ländrygg-bäcken (TLP) ger ytterligare rygg- och sidostöd och Corbacs nätöverdrag är en lätt stöddyna som hjälper vattenånga att avdunsta och förminskar samtidigt skavning.

Corbac ryggstödet består av fyra delar: 1) det justerbara fästet, 2) två stöd till bröst-ländrygg-bäcken (TLP) 3) nätöverdrag och 4) fyra monteringsklämmor.

## Avgör vilka installationsinstruktioner som är lämpliga

Bestäm vilken konfiguration som behövs innan installationen och gå vidare till rätt avsnitt i handboken:

- Vid byte av avtagbar klädsel på en rullstol UTAN körhandtag, se avsnittet "Byte av avtagbar klädsel på rullstol utan körhandtag."
- Vid byte av avtagbar klädsel på en rullstol som har ryggrör med integrerade körhandtag och fastsydda inlägg, se avsnittet "Byte av avtagbar klädsel på rullstol med körhandtag och fastsydda inlägg."
- Vid byte av avtagbar klädsel med integrerade körhandtag, men UTAN fastsydda inlägg, se avsnittet "Byte av avtagbar klädsel på rullstol med ryggrör och integrerade körhandtag utan fastsydda inlägg."
- Vid installering av Corbac ryggstödet över avtagbar klädsel, se avsnittet "Installera Corbac ryggstöd över avtagbar klädsel."

## Corbac installering



### Byte av avtagbar klädsel på rullstol utan körhandtag


1. Ta bort den nuvarande rullstolsklädseln.
2. Justera ryggrörshöjden (om så behövs) till den höjd som passar er.
3. Trä Corbac justerbara fäste över rullstolens ryggrör.
  - a. Ta ut Corbac justerbara monteringen ur pappersförpackningen. Vik inte ut.
  - b. Leta reda på inläggen för ryggrören på insidan av ryggpanelen och under justeringsremmarna. Reflexband identifierar var öppningarna för ryggrörsinläggen finns.
  - c. Trä ryggrörsinläggen i Corbac justerbara fäste över ryggstolens ryggrör. (Det kan hända att du måste lösgöra justeringsremmarna på fästet.)

**⚠ Om man inte använder inläggen till ryggrören kan det leda till att Corbac ryggstödet glider ner för ryggrören och skadar användaren.**
4. Dra åt justeringsremmarna lite grann. På vissa styvare rullstolar kan en eller flera av de nedre justeringsremmarna behövas placeras under förstyrningsröret.
5. Dra ner och fäst avskildhetsfliken i sätets sele för att tillåta tillräckligt mycket slak så att dynan kan placeras mot ryggrören.
6. Installera sittdynan och försäkra att den sitter på rätt plats.
7. Gå vidare till avsnittet "Montering av Corbac ryggstödet."



### Byte av rullstolens avtagbara klädsel med kärhandtag och fastsydda inlägg

1. Bekräfta att Corbac ryggstödet kommer att användas utan rullstolens originalklädsel och att de bakre rören är utrustade med kärhandtag (A) och fastsydda inlägg (B) som visas på bild 1.
2. Ta ut Corbac justerbara fäste ur pappersförpackningen. Vik inte ut.
3. Leta reda på den stora fickan under justeringsremmarna.
4. Trä Corbacs justerbara fäste över kärhandtagen på rullstolen och tryck handtagen igenom hålen som finns på fickans insidor i övre hörnen och på sidorna.
5. Placera Corbac fästets öglor mot det nuvarande fastsydda inlägget på rullstolen.
6. Trä skruven från den nuvarande rullstolsklädseln genom öglan och in i det fastsydda inlägget och dra åt ordentligt (bild 2).
7. Dra åt Corbac fästets spännremmar ordentligt. På vissa styvare rullstolsmodeller kan det behövas att man placerar de nedre remmarna under styvhetsröret.
8. Dra ner och fäst avskildhetsfliken i sätets sele för att tillåta tillräckligt mycket slak så att dynan kan placeras mot ryggrören.
9. Installera sittdynan och försäkra att den sitter på rätt plats.
10. Gå vidare till avsnittet "Montering av Corbac ryggstödet."

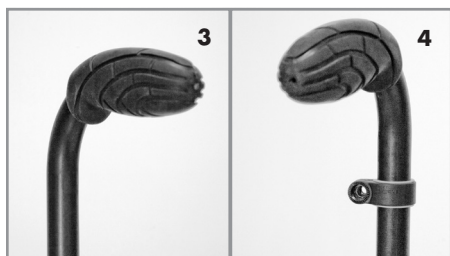


### Byte av avtagbar klädsel på rullstol med ryggrör och integrerade kärhandtag utan fastsydda inlägg

1. Bekräfta att Corbac ryggstödet kommer att användas utan rullstolens ryggklädsel och att de bakre rören är utrustade med kärhandtag men utan fastsydda inlägg (bild 3).
2. Fastställ rörsdiametern där översta delen av Corbac ryggstödet kommer att placeras.
3. Använd följande klämmor till din rörsdiameter:
  - 1 tum rör ..... Stora klämmor utan mellanlägg
  - 7/8 tum rör ..... Stora klämmor med mellanlägg
  - 3/4 tum rör ..... Små klämmor med mellanlägg
4. Med klämmornas skruvinlägg mot baksidan av rullstolen, sätt fast klämmorna genom att sprida ut klämmorna på rören (bild 4). Justera klämhöjden till 3/4 tum nedanför den slutliga Corbac höjden och försäkra att båda klämmorna är på samma höjd över sätesskenorna (bild 5). Sätt inte fast skruvarna vid detta tillfälle.
5. Installera Corbacs justerbara fäste.
  - a. Ta ut Corbacs justerbara fäste ur pappersförpackningen och ta loss nätöverdraget. Vik inte ut. Leta reda på de stora fickorna under justeringsremmarna.
  - b. Trä Corbacs justerbara fäste över kärhandtagen och klämmorna på rullstolen och tryck handtagen igenom hålen som finns på den stora fickans insidor i övre hörnen och på sidorna.
  - c. Placera fästets justerbara öglor mot klämmorna och för in de 10-32 skruvar som medkommer. Justera klämmornas rotationer så att det passar det justerbara fästets böjning.
6. Dra åt remmarna lite grann. På vissa styvare rullstolsmodeller kan de nedre remmarna finnas under förstavningsröret.
7. Dra ner och fäst avskildhetsfliken i sätet för att tillåta tillräckligt mycket slak så att en sittdyna kan placeras mot ryggrören.

8. Installera sittdynan och försäkra att den sitter på rätt plats.
9. Gå vidare till avsnittet "Montering av Corbac ryggstödet."


### Installering av Corbac ryggstöd över avtagbar klädsel

1. Låt den avtagbara klädseln sitta kvar på rullstolen.
2. Sätt fast Corbacs justerbara fäste.
  - a. Ta ut Corbac justerbara fäste ur pappersförpackningen. Vik inte ut.
  - b. Leta reda på den stora fickan under justeringsremmarna.
  - c. Trä Corbacs justerbara fäste över rullstolens avtagbara klädsel. Kontrollera att den avtagbara klädseln är införd i den stora fickan. (Det kan hända att du måste lösgöra justeringsremmarna något.)
3. Dra åt remmarna lite grann. På vissa styvare rullstolsmodeller kan de nedre remmarna finnas under förstyrningsröret.
4. Dra ner och fäst avskildhetsfliken i sätets sele för att tillåta tillräckligt mycket slak så att en sittdyna kan placeras mot ryggrören.
5. Installera sittdynan och försäkra att den sitter på rätt plats.
6. Gå vidare till avsnittet "Montering av Corbac ryggstödet."

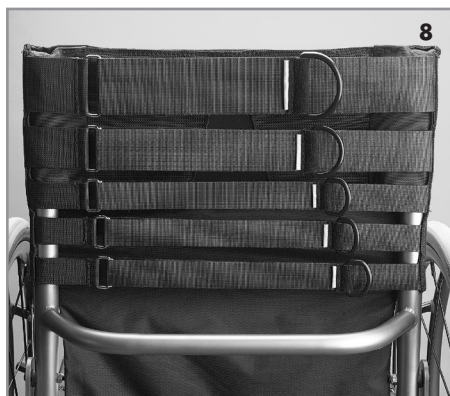

### Montering av Corbac ryggstödet

1. För dig över till rullstolen.
2. Justera fästets remmar för optimal balans och båljustering (bild 8).
3. Justera bröst-länd-bäcken (TLP) stöden (bild 9).
  - a. Luta dig framåt och placera TLP-stöden (med spetsarna pekande inåt) mot din bål och önskad plats på ländrygg-sakrala området.
  - b. Luta dig tillbaka och sätt fast kilarna på det justerbara fästets främre yta med hak- och ögelfästet.
  - c. TLP-stöden kan flyttas upp/ner, in/ut och kan roteras. I vissa fall kan de sträcka sig utanför bredden av rullstolsramen och kan trimmas.
  - d. Fortsätt att justera TLP-stöden tills du nått önskad hållning och bekvämlighet.
4. Montera nätöverdraget (bild 10).
  - a. Luta dig framåt och dra nätöverdraget över det justerbara fästet och TLP-stöden.
  - b. Sätt fast hakfästet på insidan av den nedre/främre delen av överdraget med ögelfästet på framsidan av det justerbara fästet.
  - c. Luta dig tillbaka och sätt fast överdragets ögleremmar med de justerbara fästremmarna på baksidan.
  - d. Dra nätöverdragets bakflik över de justerbara fästremmarna. Ögleremmarna på bakfliken kommer att fästa sig på baksidan av de justerbara fästremmarna.
  - e. Det kan hända att omjustering av TLP-stöden behövs efter att överdraget är på plats. Ta då bara bort överdraget, justera om TLP-stödets position och montera om överdraget.

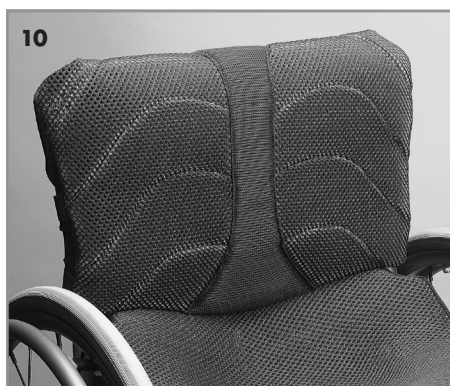






## Första användningslängd

Före längre sittande är det lämpligt att använda din Ride Corbac under en kortare tid och att visuellt kontrollera alla områden som har kontakt med ryggstödet. Alla rodnader bör försvinna inom 10-30 minuter. Kontakta din doktor eller terapeut om rodnad varar längre än 30 minuter. Så länge inte hudundersökningar visar några rodnader som varar längre än 30 minuter kan du med säkerhet fortsätta användning. Hudkontroller bör göras dagligen även efter att hudtolerans har fastställts. Fortsätt att utföra rutinmässiga tryckavlastningstekniker emellanåt (framåtlutning) som rekommenderas av din doktor.

**⚠ VARNING:** Om rodnad i samband med användning av Corbac-ryggstödet varar längre än 30 minuter, avsluta användning och kontakta din terapeut eller doktor omedelbart.

## Uppföljning

Det rekommenderas att din doktor kontrollerar din sittställning och hudens integritet åtminstone årligen eller när du genomgår en förändring i vikt, kroppshållning eller allmäntillstånd som kan påverka din förmåga att sitta säkert, bekvämt och funktionellt.

Tvättsymboler	
	Maskintvätt varmt vatten (40° C)
	Använd ej blekmedel
	Droptorka
	Kemtvättas ej
	Stryks ej

## Skötsel och underhåll av din Ride Corbac

### Rengöring av Corbac nätöverdrag

- Ta bort nätöverdraget från Corbac ryggstödet.
- Sätt fast hak/öglefästen med varandra. Lägg i en påse med blixtlås.
- Tvätta i maskin eller för hand med varmt vatten (vanligt tvättmedel utan blekmedel).
- Hängtorka

### Rengöring av Corbac justerbara fäste

Använd en fuktig trasa eller mild desinfektionsmedel, rengör avskildhetsfliken, TLP-stöden och basdelar så som behövs.

**VARNING:** Rengör inte din Corbac med isopropylalkohol eller andra kemiska lösningsmedel.

## Fordonssäkerhet

**⚠ RISK FÖR SKADOR:** Corbac ryggstödet har inte testats dynamiskt för användning i bil. Lita inte på ett Corbac ryggstöd för kollisionstöd i bil. Allvarlig skada eller dödsfall kan inträffa vid trafikolycka om inte korrekta fordonssäkerhetsfunktioner från tillverkaren användes.

1. Flytta dig alltid ur din Corbac och in i fordontillverkarens bilsäte och fasthållningsanordningar för bilresor.

## Underhåll

Corbac ryggstödet och dess tillbehör bör rutinmässigt kontrolleras minst var sjätte månad för lösa, saknade eller skadade beståndsdelar och ordentlig funktion. Undersök och dra åt alla beståndsdelar enligt denna handbok. Kontakta din auktoriserade Ride Designs leverantör gällande eventuellt skadade eller saknade beståndsdelar.

**⚠** Fortsätt INTE att använda din produkt om den har några lösa, saknade eller skadade beståndsdelar.

## Produktens livslängd

Den längsta avsedda livslängden för denna produkt är fyra år.

## Omanvändning

⚠ RISK FÖR SKADOR: Kontakta en auktoriserad Ride Designs återförsäljare innan överföring till ny användare. Använd INTE denna produkt om skada upptäcks.

## Bortskaffande

♻ Återvinning av beståndsdelar och material per lokala, statliga och nationella bestämmelser.

---

## Garanti Policy

Ditt Ride Designs® Corbac™ justerbara ryggstöd har omsorgsfullt konstruerats för att möta behoven för din hållning och din huds integritet. Denna begränsade garanti gäller under 24 månader från leveransdatum till originalköparen. Om något material- eller tillverkningsfel upptäcks kommer Ride Designs att reparera eller byta ut beståndsdelarna så som passar dig. Denna begränsade garanti täcker inte dagligt slitage eller skada som resulterats av misskötsel, felanvändning, försummelse eller genom att inte följa skötselanvisningarna.

Fordringar och reparationer bör skötas om av din närmaste auktoriserade Ride Design tekniker. En kopia på köpebrevet utfärdat till produktens köpare kan krävas innan behandling av garantianspråk.



### Ride Corbac ryggstödet fungerar bäst när det används med en kompletterande Ride Designs dyna

**Ride Forward dynan** är mest lämplig för personer med mild till måttlig risk för hudskador.

Uppnå hög hudskyddsnivå och funktionell prestanda med **Ride Java dynan** (endast Ride Custom dynan kan ge högre skydds- och stödnivå).



För personer som löper större risk för hudskador och / eller har det svårare att behålla kroppshållningen är **Ride Custom dynan** bäst för stöd och hudvård. Den är speciellt formad för att stödja en individs unika storlek, form, hållning och funktionskrav. Endast tillgänglig i USA.

Mer information om hela Ride Designs utbud av dynor finns tillgängligt på [www.ridedesigns.com](http://www.ridedesigns.com).

## Installationsnoteringar

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Patenter: [www.ridedesigns.com/patents](http://www.ridedesigns.com/patents)  
© 2015, Ride Designs. 090-005-B



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Tyskland